

# KOMPAKTES SHIATSU-MASSAGEGERÄT

## EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des kompakten Shiatsu Massage-Geräts. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen und Warnhinweise. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sie enthält wichtige Informationen.

## INHALT

- Kompaktes Shiatsu-Massagegerät
- AC-Netzadapter
- 12 V DC Autoadapter


## FASER-INHALT

LEINENSTOFF: 50 % Polyester, 50 % Kation.

GEWEBE: 68,3 % Polyester, 31,7 % Nylon.

## ERSTE SCHRITTE

1. Stecken Sie den AC-Netzadapter oder den 12V DC Autoadapter in das kompakte Shiatsu-Massagegerät und in eine Steckdose bzw. in die Netzbuchse Ihres Autos.
2. Positionieren Sie das Massagegerät und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Der Gurt kann zur Positionierung des Massagegeräts an der Lehne des Autositzes verwendet werden.
3. Genießen Sie Ihre Wärmemassage!  
Anmerkung: Das Massagegerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch ab. Sie können es sofort wieder einschalten, es sei denn, es hat sich überhitzt.

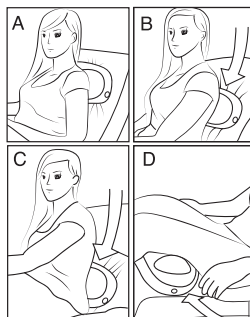

ANMERKUNG: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen.

Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass es bei einer bestimmten Installation nicht zu Interferenzen kommt. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne umstellen oder anders ausrichten.
  - Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
  - Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die, an die der Receiver angeschlossen ist.
  - Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate.
- Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

## MERKMALE

- Shiatsu-Massage für schmerzende oder verspannte Muskeln
- duale Massageköpfe mit je 2 Knoten
- beheizt für wohltuende Wärme
- zu Hause oder im Auto verwenden und mit dem Gurt sichern
- schaltet sich zur Sicherheit nach 15 Minuten automatisch ab

## PFLEGEHINWEISE

- Reinigen Sie das Gerät nur punktuell. Ziehen Sie den Netzstecker und wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab.
- Lassen Sie es ausschließlich lufttrocknen. Geben Sie es niemals in einen Trockner.
- Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es wieder einstecken.
- Nicht in Wasser eintauchen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Reinigungsmittel oder Seife.

## FEHLERSUCHE

- Prüfen Sie alle Stromanschlüsse
- Keine Funktion nach längerem Gebrauch? Das Gerät hat sich möglicherweise überhitzt und kühlt sich automatisch ab. Bitte schalten Sie den Netzschalter aus, ziehen Sie den Netzstecker des Massagegeräts und lassen Sie es 90 - 110 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder normal benutzen.
- Ziehen Sie den Netzstecker und reinigen Sie ihn bei Bedarf mit einem feuchten Tuch. Vor der nächsten Verwendung vollständig an der Luft trocknen lassen.
- Technische Daten: Eingangsleistung: DC 12 V, 2500 mA  
Nennleistung: 30 W

### SICHERHEITSHINWEISE: BITTE VOR GEBRAUCH LESEN

- Kein Artikel für Kinder. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Tragen Sie bei der Verwendung immer ein Shirt/Kleidung. Nicht auf nackter Haut verwenden, um mögliche Reizungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie diesen Artikel nicht, wenn Sie schwanger sind oder eine Verletzung oder Krankheit haben. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie an einer Krankheit leiden, die eine sichere Verwendung dieses Artikels verhindern könnte.
- Nicht auf empfindlichen Hautstellen oder in schlecht durchbluteten Bereichen anwenden.
- Schlafen Sie während der Anwendung nicht ein.
- Betreiben Sie das Gerät niemals unter Decken, unter denen die Luftöffnung blockiert werden kann. Übermäßige Hitze kann auftreten und zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist.
- Lassen Sie das Gerät immer abkühlen, wenn es zu heiß wird.
- Niemals extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an.
- Tragen Sie diesen Artikel nicht am Kabel.
- Halten Sie die Luftöffnung frei von Fusseln, Haaren und ähnlichen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile.
- Produkte vor jeder Benutzung gründlich inspizieren. Wenn das Produkt abgenutzt, ausgefranst/gesplittert, rissig oder in irgendeiner Weise gebrochen erscheint, verwenden Sie es nicht mehr und entsorgen Sie es sofort.
- Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Hitzeunempfindliche Personen müssen bei der Verwendung des Geräts vorsichtig sein.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten AC-Netzadapter (AUSGANGSLEISTUNG DC 12 V 2,5 A) betrieben werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

### ⚠ GEFAHRI!

- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, ziehen Sie immer sofort nach dem Gebrauch und vor der Reinigung des Geräts den Stecker aus der Steckdose.

### **BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF, DENN SIE ENTHÄLT WICHTIGE INFORMATIONEN ALS ZUKÜNFTIGES REFERENZMATERIAL.**

Aufgrund ständiger Produktverbesserungen kann die Abbildung in der Anleitung leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Verteilt von und © 2020 ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle Rechte vorbehalten.  
Nur für US: Verteilt von und © 2020 MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618.  
Alle Rechte vorbehalten. Tel.: 1-800-374-2744.

Name und Logos von Sharper Image® (einschließlich des Logos 77 und Tomorrow's Tomorrow) sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen.

Made in China

Artikelnummer: 701909

## BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben dieser Bedienungsanleitung.  
Dieses Produkt ist nicht geeignet für den gewerblichen Einsatz.

## HAFTUNG

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

## ENTSORGUNG

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Der Fachhandel stellt diese Sammelstellen für Batterien bereit. Die Sammelstelle für Elektronikgeräte gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle der Stadt oder des Handels abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. \*Cd= Cadmium; Hg= Quecksilber; Pb= Blei

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen.  
Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: <https://productip.com/?f=138f73>



## GARANTIE- UND REPARATURBEDINGUNGEN

Aufgrund der schnellen Weiterentwicklung der Produkte kann keine Garantie auf Vollständigkeit übernommen werden. Änderungen an Technik und Ausstattung sind jederzeit vorbehalten. Wenn Sie die Bedienungsanleitung in digitaler Form benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

Sie erhalten eine freiwillige 2-jährige Herstellergarantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Der Geltungsbereich dieser Garantie betrifft die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Ihre gesetzlichen Gewährleistungen bleiben durch die Garantie unberührt.

## DIE GARANTIE GILT NICHT:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
- Für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen
- Für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
- Bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind
- Wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird
- Bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile
- Bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den Transport
- Bei Schäden die durch höhere Gewalt herbeigeführt wurden
- Bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

## BATTERIEN/AKKUS UNTERLIEGEN KEINER GARANTIE, DA DIESE VERBRAUCHSTEILE SIND.

Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein - weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile. Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht. Ersetzte Teile oder Produkte gehen in unser Eigentum über. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden. Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung. Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück.

### Service-Adresse

Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Straße 20  
DE-38122 Braunschweig, Germany  
+49 (0) 531 224356-82

### Importeur

Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Straße 20  
DE-38122 Braunschweig, Germany  
[www.lived-non-food.de](http://www.lived-non-food.de)